

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ULTRAZVUKOVÁ ŠPACHTLE NA OBLIČEJ 4V1




PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

Ultrazvuková metoda se široce používá jak v lékařství, tak v kosmetice. Jedná se o ultrazvukové čisticí a ošetrující zařízení využívající nanotechnologie.

Špachtle kombinuje dvě obličejové kosmetické procedury. Používá se přímo na vlhkou pokožku, jemným ošetřením hluboce čistí pokožku drobnými ultrazvukovými vibracemi, které pomáhají odstranit odumřelé kožní buňky, nečistoty a maz. Plet' je okamžitě hladší a jemnější. Druhý režim využívá techniku kosmetických salónů – vysokofrekvenční sonoforézu, která zvyšuje účinnost aktivních látek obsažených v hydratačních krémech, sérech a přípravcích proti stárnutí pleti.

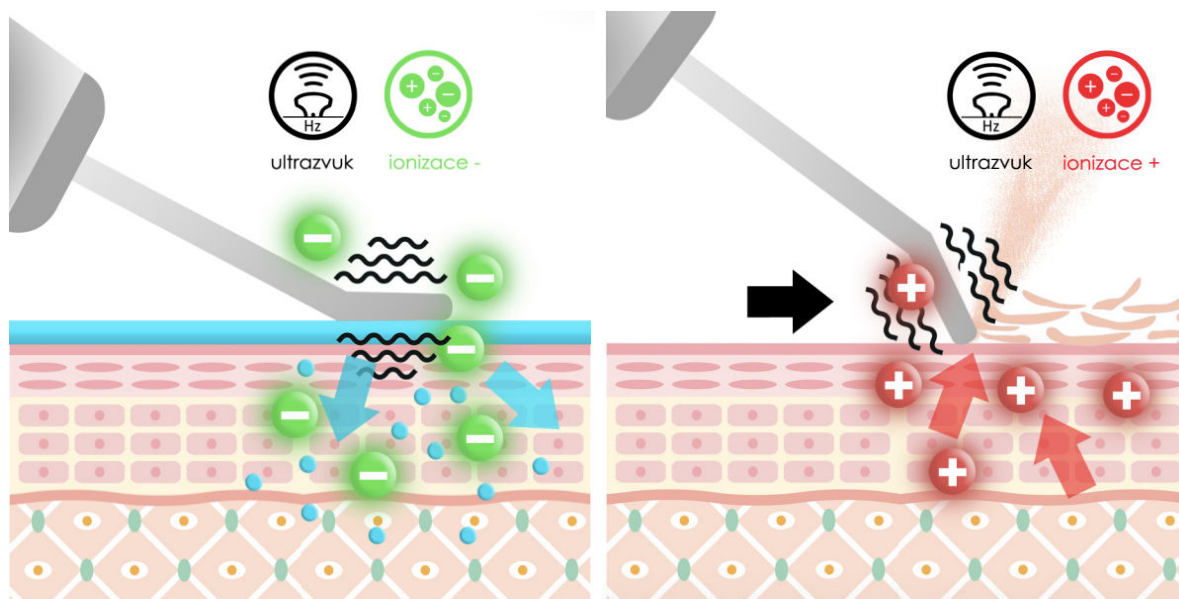

VÝHODY

☀️ Odstranění černých teček

Rozlučte se s otravnými černými tečkami. Jemné vibrace a vysokofrekvenční vlny účinně odstraňují nečistoty, mastnotu a jiné nečistoty z pórů.

Multifunkční

Náš přístroj nejen čistí pleť, ale také ji pomáhá zpevnit a docílit tak mladistvější vzhled.

Dobíjecí


Není třeba neustále měnit baterie, stačí zařízení nabít pro téměř nekonečné množství péče o pleť.

☀️ Tento výrobek je odolný proti stříkající vodě.

Nemyjte jej ale pod tekoucí vodou!


POPIS PRODUKTU

1. Ultrazvuková hlavice
2. Iontový vodič
3. Způsob použití
4. Intenzita
5. Režim
6. Tlačítko pro nastavení (3) a (4)
7. Tlačítko ON/OFF
8. Tlačítko pro nastavení (5)
9. Stojánek

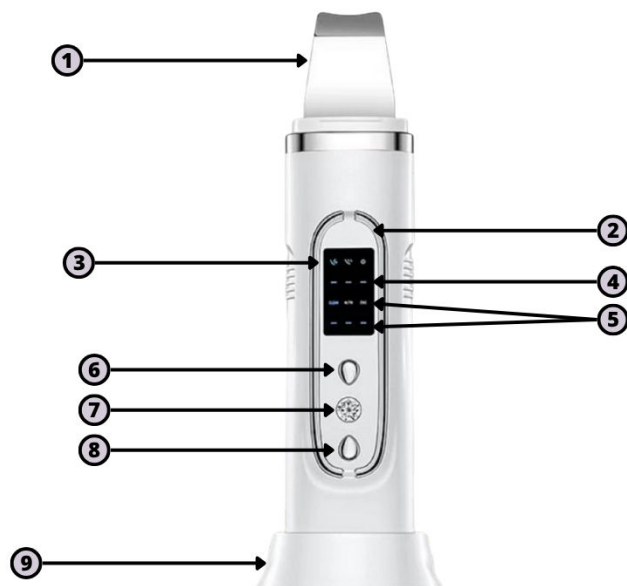


PARAMETRY


- **Napájení:** AC 100V–240V 50HZ/60HZ
- **Výstupní napětí:** 5V/400mA
- **Režim nabíjení:** Dobíjecí (lithiová baterie)
- **Výkon:** 2,5W
- **Čistá hmotnost:** Přibližně 98 g
- **Rozměry:** 190x63x17 mm
- **Barva:** Bílá

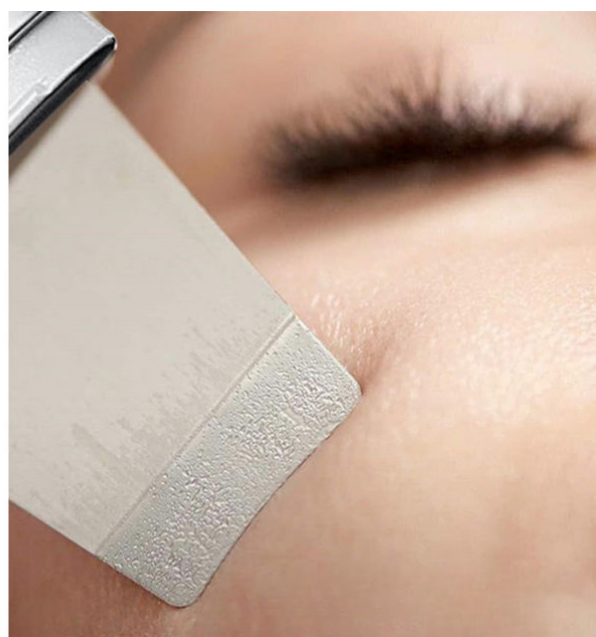


HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PLETI

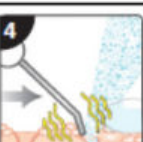	Naneste na obličej teplou vodu. Poznámka: Pro dosažení nejlepších výsledků použijte přístroj po koupání nebo sprchování. Doporučujeme 1-2 ošetření týdně.
	Zapněte přístroj stiskem tlačítka ON/OFF. Zvolte program s vysokou nebo nízkou intenzitou impulsů (horním tlačítkem).
	Napustte kousek vaty/tamponku vodou (ideálně čisticí vodou) a držte přístroj tak, aby ovládací panel byl směrem ven od vašeho obličeje.
	Pohybujte mokrou vatou/tamponkem před čepelí ve stejném směru, udržujte špachtli na kůži a zachovejte v nízkém až středním styku s pokožkou. Uvidíte jemnou spršku vody, nečistoty a špína budou stírány přední hranou čepele.

Po použití přístroj vypněte stiskem tlačítka ON/OFF. Čepel lze čistit otřením vlhkým hadříkem. Přístroj skladujte s ochranným krytem na čepeli.

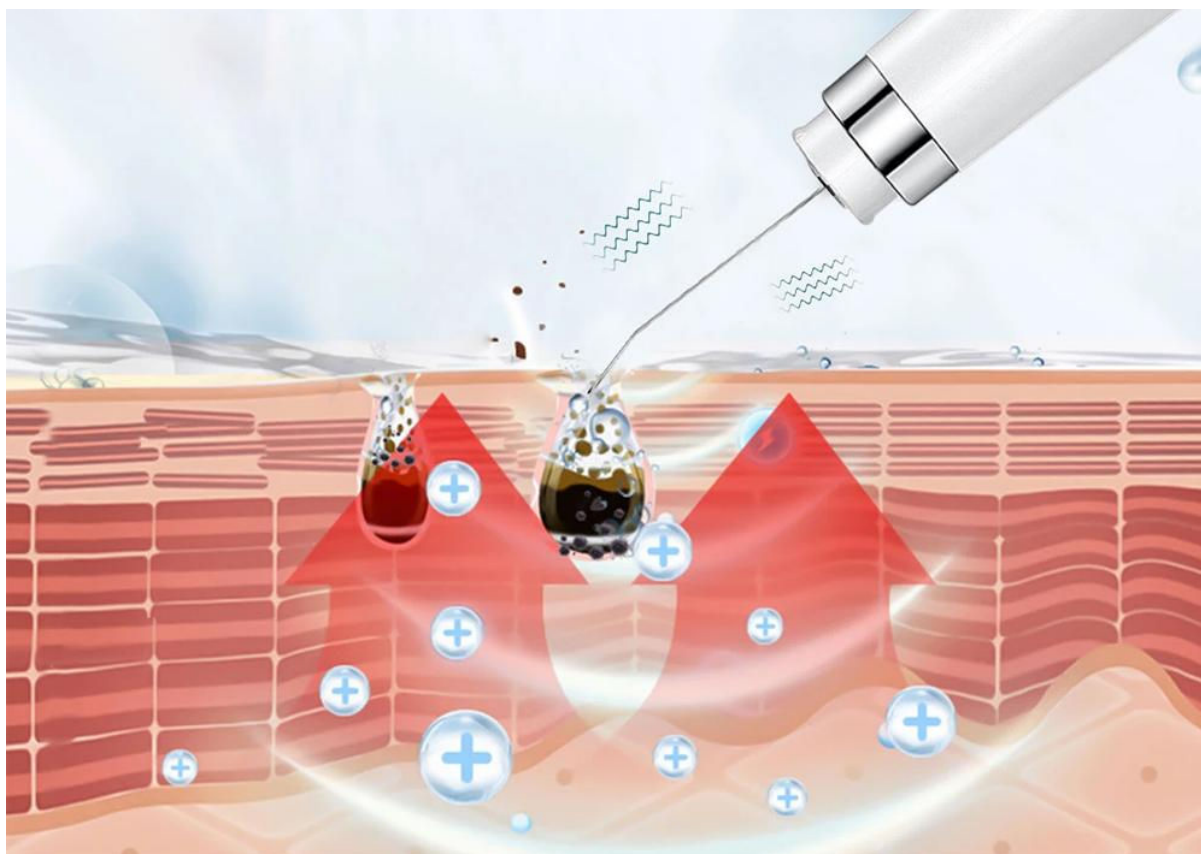


TIPY PRO EFEKTIVNÍ ČIŠTĚNÍ

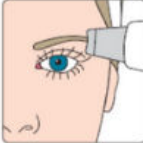	Pohybujte přístrojem od krku směrem nahoru po tváři v horizontálním směru tahem po obou stranách tváře. Systematicky pracujte přes všechny oblasti obličeje, jak je znázorněno na obrázku.
	Změňte směr práce přístroje a sestupujte ve vertikálních úsecích / tazích od oblasti krku, pracujte od čelisti k vlasové části.
	Čištění kolem křivky nosní dírky provádějte pomocí zakřiveného ostří.
	Použijte prohnutí prostřední části ostří pro očištění oblasti brady pod spodním rtem svislými tahy směrem dolů.
	Vyberte nastavení nízké intenzity pro oblast obočí. Při hloubkovém čištění byste se měli vyhnout jemné pleti pod očním okolím.

VÝŽIVA (NUTRI)

	Ošetření sonoforézou používá pulzující vlny k efektivnímu vstřebávání hydratačních nebo vyživujících krémů. Doporučujeme nejprve provést hloubkové čištění pleti. Zapněte přístroj stiskem tlačítka ON/OFF.
	Stiskněte jednou tlačítko volby programu pro výběr programu NUTRI.
	Nastavte si intenzitu zapracování výživy (možnost ze 3 úrovní). Defaultně je nastavena souvislá vibrace, modré světlo svítí.
	Je možné si změnit způsob zapracování výživy přerušovanou vibrací. Toho docílíte stisknutím tlačítka intenzity 4x.

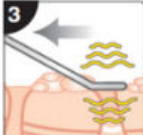	Naneste hydratační krém, sérum nebo přípravek proti stárnutí pleti dle vašeho výběru. Držte přístroj tak, aby se čepel dotýkala plochou částí vaší kůže.
	Zapněte přístroj stiskem tlačítka ON/OFF. Zvolte program a nastavení vysoké nebo nízké intenzity impulzů. Doporučujeme začít programem nízké intenzity.
	Za mírného tlaku vedte čepel přes povrch kůže pomocí zpětného pohybu. Pro dosažení nejlepších výsledků si udělejte čas a pracujte pomalu, pokryjte celou plochu obličeje. Po použití přístroj vypněte stiskem tlačítka ON/OFF.

TIPY PRO EFEKTIVNÍ APLIKACI

	Začněte v oblasti krku, za mírného tlaku pohybujte čepelí po povrchu pokožky. Pomocí zpětného pohybu pracujte od středu obličeje směrem ven.
	Pokračujte nahoru na obličej přes čelisti k vlasům. Přejíždějte přes obličej, dokud se veškerý produkt neabsorbuje.

REŽIM EMS

Slouží k mikrostimulačnímu posílení pleti; zpevňuje kontury obličeje, určené zejména po aplikaci zpevňujícího krému nebo gelu. Pomáhá při tónování pleti a jemném vyhlazení vrásek.

1. Program zvolíte obdobně jako u předchozího režimu.
2. Připravte pleť – naneste gel nebo krém, který dobře vede proud (většinou hydratační gel, kolagenové sérum, aloe vera). Suchá pleť by mohla „štípat“.
3. Nejezděte špachtlí směrem dolů – vždy jen směrem vzhůru.
Délka procedury – cca 5 minut na celý obličej.
Frekvence – 2–3× týdně.




REŽIM REJUVE

Tento režim umožňuje nastavit vyšší intenzitu působení pro větší pevnost a elasticitu pleti. Je určen pro regeneraci, vyhlazení a zpevnění pleti ve vyšší úrovni, když už ostatní režimy nestačí.



Jemná vibrace

Bodová vibrace

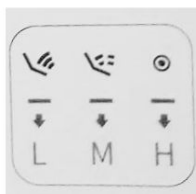

Nastavení intenzity

L - nízká

M - střední

H - vysoká

ZPŮSOB NABÍJENÍ

1. Připojení přístroje k rozhraní USB

Baterie není po opuštění továrny plně nabitá. Před použitím baterii plně nabijte.

2. K nabíjení lze použít **rozhraní USB** počítače, adaptéru (prodává se samostatně) a mobilního telefonu.

LED kontrolka svítí při nabíjení červeně, po úplném nabití se LED kontrolka rozsvítí zeleně.

Před prvním použitím odstraňte ochrannou fólii.

UPOZORNĚNÍ

- ! Pokud se zařízení po dlouhém stisknutí tlačítka napájení nespustí, nabijte jej.
- ! Pokud zařízení vydá zvuk „bi-bi-bi“, znamená to, že je baterie vybitá a zařízení se automaticky vypne.
- ! Produkt se po deseti minutách používání automaticky přepne do pohotovostního režimu a po jedné minutě se vypne, pokud se nepoužívá.
- ! Plné nabití trvá přibližně 150 minut (při prvním použití bude nabití trvat déle).
- ! Zařízení lze po plném nabití používat přibližně 80 minut.
- ! Před vypnutím zařízení nabijte včas.

ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byl aplikátor očištěn. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Výrazně by došlo ke zkrácení životnosti aplikátoru. V žádném případě nepoužívejte při údržbě aplikátoru žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch.

VAROVÁNÍ

- ! Neponořujte tento výrobek do vody.
Tento výrobek není odolný proti vodě, proto jej neumísťujte na místo, kde může spadnout nebo může být stažený do vody.
Jednotka může být čištěna otřením vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla nebo čisticí prostředky.
Nepokládejte toto zařízení v blízkosti zdrojů tepla.
Nepoužívejte tento výrobek, pokud nepracuje správně, nebo pokud spadl na zem nebo byl poškozen.
K dispozici nejsou žádné části opravitelné uživatelem jednotky.
Zneužití tohoto produktu pro jiné účely, než pro které je určen, může způsobit škodu.
Tento produkt mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo pokud dostaly instrukce týkající se použití výrobku bezpečným způsobem a pochopily rizika.
Nepoužívejte na jizvy, porušenou kůži, při onemocnění růžovkou, při pustulárním nebo zaníceném akné, odřené kůži, ekzému, zanícené nebo nemocné kůži, nebo při jakýchkoliv jiných kožních onemocněních. Pokud si nejste jisti, doporučujeme vám poradit se s lékařem.
- ! Výrobek je určen pouze pro vnější použití.

LIKVIDACE

Směrnice o Likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů (WEEE) směrnice (2002/96/EC) platí pro recyklaci produktů použitím nejlepších technik k minimalizaci dopadu na životní prostředí, odstraněním nebezpečných látek a zabráněním zvyšování odpadu. Výrobek je klasifikován jako Elektrické nebo elektronické zařízení, proto zajistěte na konci jeho životnosti správnou likvidaci správným způsobem v souladu s místními předpisy. Nesmí se likvidovat společně s běžným domovním odpadem.



Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny a poté je uschovejte pro budoucí použití.



Tento výrobek obsahuje lithium-iontovou baterii.



Tento produkt není vhodný pro nabíjení v koupelně.



Tento produkt je určen pouze pro použití uvnitř.



Tento produkt je v souladu s platnými právními předpisy EU.



Vstupní zásuvková koncovka kladná.