

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## ÚSTNÍ MEZIZUBNÍ SPRCHA




**PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY**

**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY**

## POPIS

- Zubní irigátor je mimořádně užitečný přístroj pro každodenní ústní hygienu. Umožňuje důkladně vyčistit zuby a prostory mezi nimi od zbytků jídla.
- Je ideální pro osoby, které nosí rovnátka, protože pomáhá udržovat ústa čistá.
- Přístroj nevyžaduje baterie a funguje na principu čerpadla. Do zásobníku nalijte vodu nebo ústní vodu, poté namiřte špičku irigátoru směrem k zubům a stiskněte tlačítko.

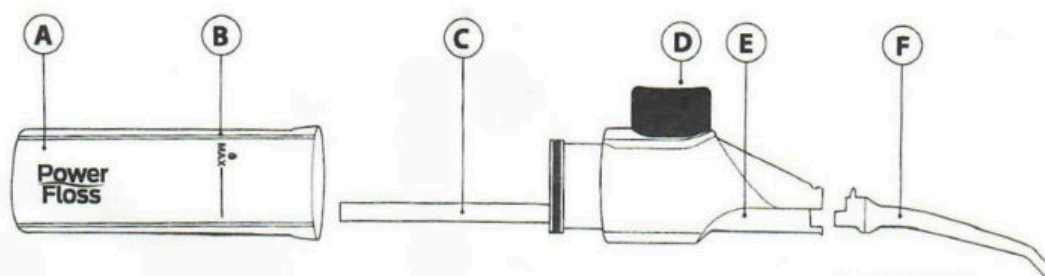


- A) Nádržka
- B) Maximální plnicí linie
- C) Trubice

- D) Tlačítko
- E) Čerpadlo
- F) Tryska

## POUŽITÍ

1. Držte přístroj ve vzpřímené poloze, jemně otočte nádržkou proti směru hodinových ručiček a oddělte ho od horní části těla.
2. Naplňte nádržku (dodržujte max. hodnoty) vodou nebo ústní vodou.
3. Znovu nasadte kryt čerpadla tak, že jej vložíte do nádrže a jemně otočte ve směru hodinových ručiček, aby zapadl na místo.
4. Umístěte palec na tlačítko.
5. Během používání vždy udržujte přístroj ve svislé poloze, aby byl zajištěn stabilní proud.

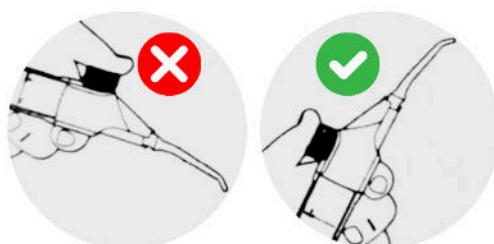

6. Stiskněte tlačítko několikrát za sebou, dokud tekutina nevystoupí v ustáleném proudu. Rychlost a objem proudu můžete upravit změnou síly, která na tlačítko působí. Nejlepších výsledků dosáhnete experimentováním s různými tlaky a změnou úhlu dentální trysky.

**Čištění mezi zuby:** Umístěte trysku proti zubům v linii dásní, zavřete ústa kolem trysky a stiskněte tlačítko.

**Čištění můstku, rovnátek, implantátů:** Umístěte trysku pod můstek nebo rovnátka a stiskněte tlačítko. Pro dosažení nejlepších výsledků čistěte každé místo z více než jednoho úhlu, kdykoli je to možné.

## VLASTNOSTI

- Odstraňuje přebytečný zubní plak
- Odstraňuje přetrvávající zbytky jídla z mezizubních prostor
- Materiál: plast
- Nevyžaduje napájení
- Princip čerpadla
- Zásobník na vodu nebo ústní vodu
- Snadné použití
- Rozměry: 21,5 cm x 3 cm

## ÚDRŽBA

- Po použití vyprázdněte nádržku stisknutím tlačítka - odstraníte tak veškerou zbývající tekutinu. Důkladně propláchněte teplou vodou a otřete do sucha. Přístroj s nikým nesdílejte.
- K čištění používejte měkký antistatický hadřík, který nezanechává žmolky.
- Nepoužívejte drátěnky ani chemické čisticí prostředky.
- Výrobek neponořujte do vody.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Zajistěte, aby obalové materiály nebyly ponechány bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi, vysokou vlhkostí, vlhkostí, hořlavými plyny, parami a rozpouštědly.
- Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání.
- Pokud již není možný bezpečný provoz, přestaňte výrobek používat a před dalším použitím jej zajistěte. Bezpečný provoz není možný, pokud výrobek:
  - byl poškozen,
  - nefunguje správně,
  - byl delší dobu skladován v nepříznivých podmínkách,
  - byl během přepravy přetížen.

## RECYKLACE

### POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OBALOVÝMI ODPADY

Použitý obalový materiál odevzdejte na místě určeném místními úřady k likvidaci.

### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH PŘÍSTROJŮ



Tento symbol umístěný na výrobcích nebo v jejich dokumentaci označuje, že použité elektrické a elektronické výrobky se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Tyto výrobky musí být předány na určené skládky k řádné likvidaci, odstranění a recyklaci. V některých zemích EU nebo jiných evropských zemích lze tyto výrobky místo toho vrátit místnímu prodejci při nákupu ekvivalentního nového výrobku. Správná likvidace těchto výrobků zachová cenné zdroje surovin a pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které může nesprávná likvidace odpadu způsobit. Další informace získáte na obecním úřadě nebo v nejbližším skladu odpadů. V případě nesprávné likvidace tohoto typu odpadu mohou být uloženy sankce v souladu s místními předpisy.

#### Likvidace výrobků v zemích Evropské unie

Pokud chcete vyřadit provozu elektrické a elektronické zařízení, získajte potřebné informace od prodejce nebo dodavatele výrobku.

#### Likvidace výrobků v zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol platí v Evropské unii. Pokud si přejete tento výrobek zlikvidovat mimo EU, získajte potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyhrazujeme si právo na změny textu, designu a technických údajů výrobku bez předchozího upozornění.

**IMPORTER/EINFUHRER/DOVOZCE:**

**VERK GROUP SP. Z O.O. SP.K.**

**WYGODY 16**

**05-090 PODOLSZYN NOWY**

**POLAND**

**[www.verkgroup.pl](http://www.verkgroup.pl)**

**[www.internetowa-hurtownia.pl](http://www.internetowa-hurtownia.pl)**

**[www.internetowa-hurtownia.chh.pl](http://www.internetowa-hurtownia.chh.pl)**